


Mod. 70

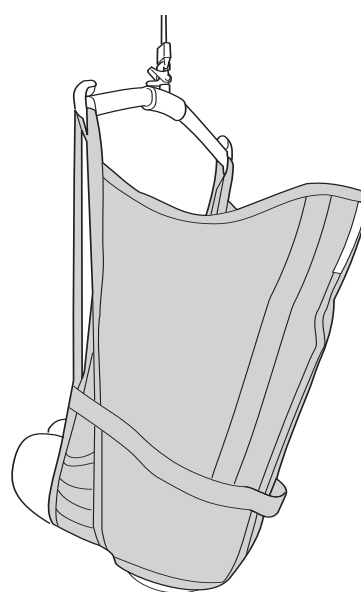

Mod. 75

## Descripción del producto

El arnés Liko Amputados es un dispositivo de elevación sencillo y seguro especialmente diseñado para elevar a pacientes con una amputación relativamente alta de ambas piernas. Se recomienda también para la elevación de pacientes que no estén amputados, pero que muestren una tendencia a salirse por deslizamiento de otros arneses de tipo similar. El arnés Liko Amputados puede ser también idóneo para la elevación de otros pacientes, por ejemplo los que tengan amputada una sola pierna.

Los soportes de las piernas se colocan, por lo general, solapados bajo ambos muslos. La construcción con las guías especiales de cintas a los lados del arnés asegura la colocación de aquellos soportes y contribuye a que la abertura para las nalgas no se agrande, sino que se mantenga inalterada, aumentando así la seguridad en la elevación.

Un arnés Liko Amputados bien probado y cuidadosamente aplicado da al paciente una sensación de seguridad muy buena y un alto confort.

El arnés Liko Amputados, mod. 70, sirve de apoyo a toda la espalda, hasta la altura de la nuca. El modelo 75 tiene reposacabezas.

Los brazos permanecen por dentro del arnés. Para pacientes de gran envergadura o personas que sean sensibles a la presión en los hombros, se recomienda una combinación con la percha Universal 670.

El arnés Liko Amputados mod. 70 se produce en distintos materiales. Como, generalmente, el paciente no se queda sentado en el arnés Amputados una vez realizada la elevación, recomendamos el diseño en poliéster, ya que es un material muy resistente y dócil por la baja fricción que da. Fácil de poner y quitar. Este modelo existe asimismo en algodón y en red de poliéster, para quien deje el arnés en la silla después de la elevación o para el que, sencillamente, quiera una alternativa más aireada.

El arnés Amputados mod. 75 se produce en poliéster. Los dos modelos tienen soportes de las piernas con insertos rígidos que nivela la presión e impide que el arnés se pliegue bajo los muslos.


El arnés Liko Amputados se puede poner y quitar en posición de sentado o tumbado.

**△ Este es un triángulo de aviso, utilizado para situaciones en que se debe tener un cuidado especial.**


*En el texto se denomina "paciente" a la persona elevada, y "cuidador", a la persona que la ayuda.*

**📖 Lea la guía de instrucciones tanto del arnés como de la grúa utilizada. Las guías de instrucciones se pueden descargar gratuitamente de [www.liko.com](http://www.liko.com).**

# Arnés Liko Amputados

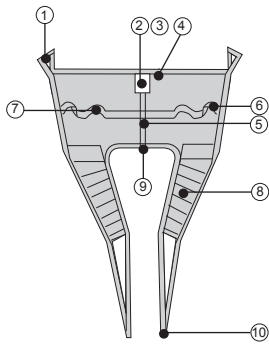

Mod. 70

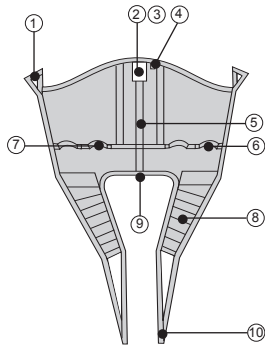

Mod. 75


1. Lazo superior
2. Etiqueta de marca
3. Número de serie
4. Etiqueta de la talla
5. Cinta trasera central

6. Guía de cinta
7. Asa de guía
8. Soporte de las piernas
9. Borde inferior
10. Lazo de soporte de las piernas


## △ ¡Recuerde!

- Se evaluará de un caso a otro, si se necesitan uno o dos cuidadores.
- Planifique la operación antes de la elevación, para hacerla de forma tan segura y flexible como sea posible.
- A pesar de que las perchas Liko van provistas de ganchos de seguridad, hay que poner una atención especial: antes de levantar al paciente de la base donde se encuentre, pero con las cintas ya bien estiradas, es importante controlar que las cintas estén correctamente enganchadas en la percha.
- No levante nunca de su base a un paciente más de lo imprescindible para poder realizar el desplazamiento.
- Controle que el paciente esté sentado en el arnés de forma segura, antes de realizar el desplazamiento a otro sitio.
- No deje nunca al paciente desatendido en una operación de elevación.
- Cuídese de que las ruedas de la silla, cama, litera, etc., estén bloqueadas durante la operación que vaya a realizar.


## Elevación desde la posición de sentado

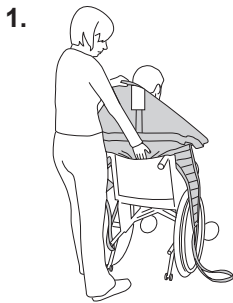


1. Coloque el arnés por detrás de la espalda del paciente con la etiqueta de marca hacia fuera. Doble el borde inferior alrededor de las puntas de sus dedos, para poder dirigir el arnés a su sitio con mayor facilidad.

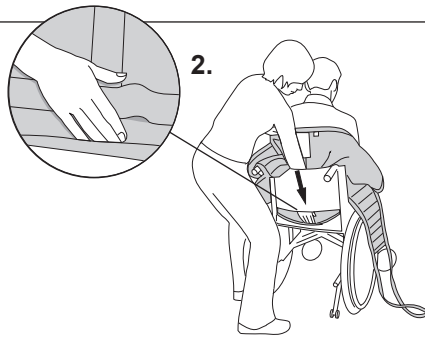


2. Con ayuda de la palma de la mano, presione el borde inferior del arnés para bajarlo hasta el coxis del paciente. **Esto es muy importante.** La colocación correcta se facilita, si se inclina un poco hacia adelante al paciente.

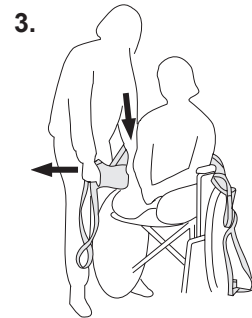


3. Estire los soportes de las piernas que lleva el arnés, a lo largo de la parte externa de los muslos. **Consejo práctico:** con la palma de su mano entre el cuerpo y el arnés, baje la cinta del borde inferior del soporte de las piernas hasta el asiento. Al mismo tiempo, tire de ese soporte hacia adelante con la otra mano, para estirarlo.

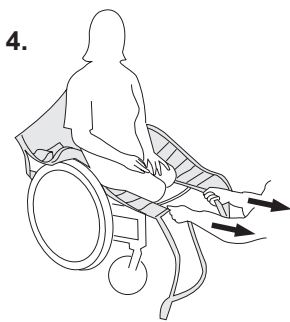

4. Asegúrese de que el arnés esté estirado en el borde inferior tirando con cuidado de los lazos de los soportes de las piernas.

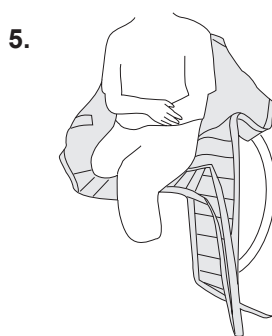


5. Coloque un soporte de las piernas debajo de ambos muslos y meta bien ese soporte bajo las nalgas. Meta el lazo del soporte de las piernas por la guía de la cinta, por el lado interno del arnés.

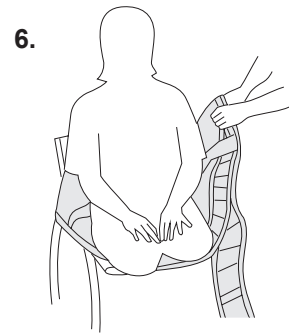


6. El soporte de las piernas por el lado donde el paciente tenga el muñón más corto, debe colocarse siempre lo más cerca del cuerpo posible. Si, por ejemplo, el muslo derecho tiene una amputación alta, el soporte derecho de las piernas debe ponerse en su sitio antes que el izquierdo, para evitar la presión contra el muñón.

7.

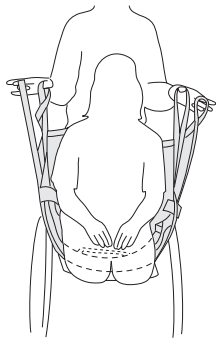


Coloque el otro soporte de las piernas de forma similar debajo del primero y meta el lazo del soporte por la guía de la cinta, por el lado externo del arnés.

8.

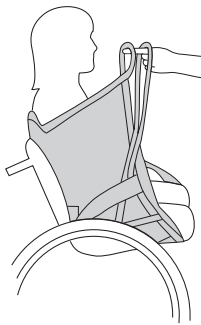

**Importante:** controle que el lazo del soporte de las piernas llegue a igual altura que el lazo superior. En caso contrario, ajuste la colocación de los soportes de las piernas.


9.

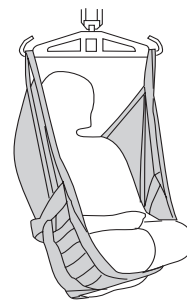


Enganche en la percha los lazos superiores y los lazos de los soportes de las piernas y eleve. Controle que el paciente esté bien sentado antes de hacer el desplazamiento a otro sitio.

## Elevación a la posición de sentado


Para colocar en una silla, es importante que el paciente quede suficientemente atrás en la silla como para estar bien sentado. Para facilitar esa colocación, hay varios métodos. ¡Evite tirar fuerte de las asas de guía!

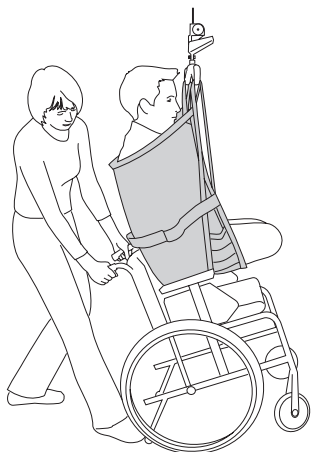

Incline la silla de ruedas, al mismo tiempo que baja al paciente. Deje que las nalgas se deslicen por el respaldo hasta el asiento.

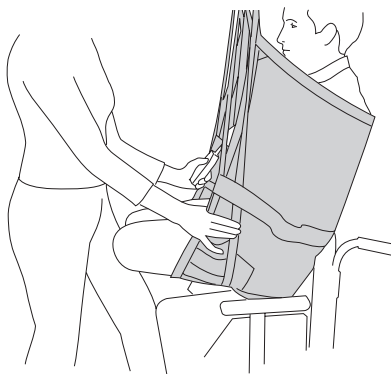


Presione a los lados del arnés, al mismo tiempo que baja al paciente, para que este quede suficientemente atrás sobre el asiento.

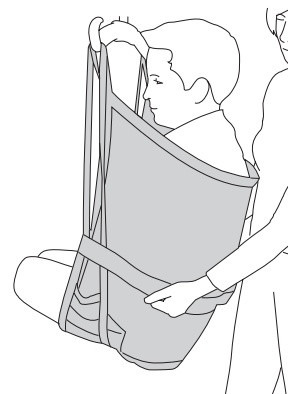


Evite tirar de las asas de guía del arnés, ya que no aguantan un esfuerzo tan grande como el que se puede producir. Además, acaban pilladas contra el respaldo de la silla de ruedas.


## Elevación desde la posición de tumbado

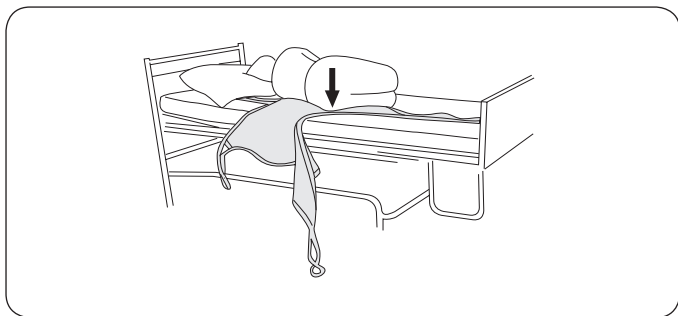

Si la cama está equipada con posibilidades de ajuste de su posición, deben utilizarse para lograr un buen funcionamiento y una buena ergonomía. Comience por elevar la cama a la "altura de trabajo" que le venga bien a usted, como cuidador/a. Gire al paciente hacia usted para prevenir el riesgo de que se caiga de la cama. Coloque el lado largo del arnés por debajo del paciente tan adentro como sea posible y con el borde inferior al nivel del coxis. Haga un par de pliegues en el arnés, de forma que su "cinta trasera central" quede bajo la columna del paciente, cuando se le dé luego la vuelta con cuidado. Saque cuidadosamente el arnés por el otro lado.

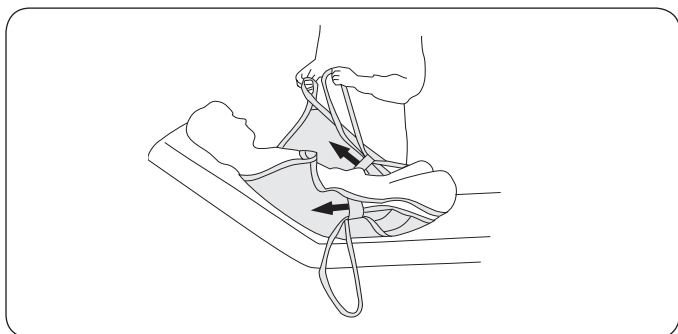

Coloque un soporte de las piernas debajo de ambos muslos y meta bien ese soporte bajo las nalgas. Vea la descripción en la pág. 2, figura 6. Meta el lazo del soporte de las piernas por la guía de la cinta, por el lado interno del arnés. Coloque el otro soporte de las piernas de forma similar y meta el lazo del soporte por la guía de la cinta, por el lado externo del arnés.

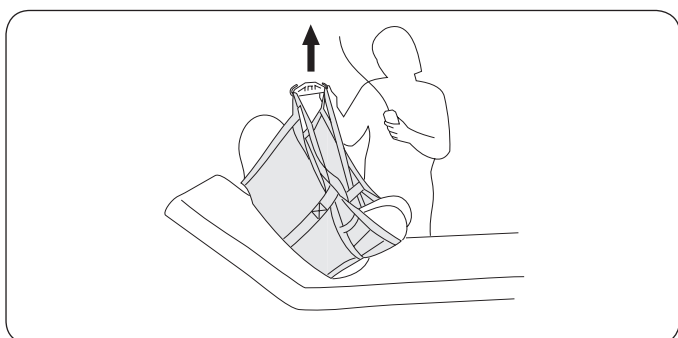


Levante el reposacabezas. Controle que el lazo del soporte de las piernas llegue a igual altura que el lazo superior. Enganche en la percha los lazos superiores y los lazos de los soportes de las piernas y eleve. Controle que el paciente esté bien sentado, antes de hacer el desplazamiento a otro sitio.

## Elevación a posición de tumbado

Eleve la cabecera de la cama antes de colocar en ella al paciente. Esto resulta más cómodo para el paciente. Aparte a un lado los soportes de las piernas y retire el arnés tirando con cuidado de él hacia arriba por detrás de la espalda. También puede abatir el respaldo y girar al paciente de lado, doblar el arnés bajo la espalda, volver al paciente cuidadosamente hacia el otro lado y retirar el arnés.

## El paciente no está bien sentado - ¿qué fallo hemos hecho?

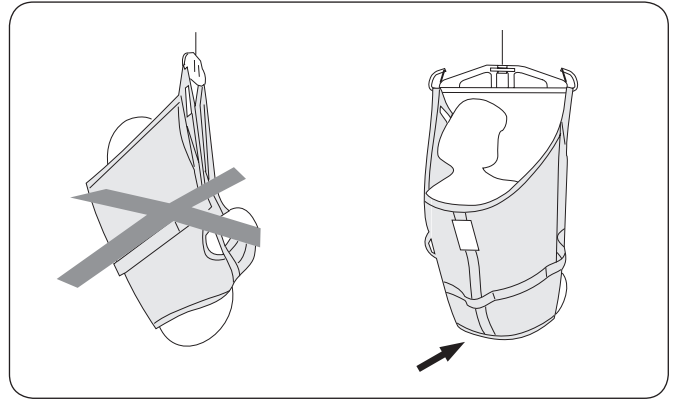


El arnés no ha sido bajado lo suficiente por la espalda. Las nalgas quedan colgando y el paciente queda demasiado inclinado hacia atrás. Baje al paciente y ajuste la colocación del arnés. Es importante que **todos los lazos lleguen a la misma altura**, antes de iniciar la elevación, vea la pág. 3.

## Elevación con soportes de las piernas cruzados

En algunos casos se quiere levantar a un paciente, que no tiene las piernas amputadas, con el arnés Liko Amputados y con "soportes de las piernas cruzados". Los consejos que se dan en esta guía de instrucciones no están adaptados a ese procedimiento, excepto por lo que se refiere a la descripción siguiente. En lugar de ello, remitimos al personal a la guía de instrucciones del arnés Liko Universal, mod. 00 para el mod. 70 y del arnés Liko Original con Respaldo Alto, mod. 20/21 para el mod. 75. Ambas guía de instrucciones pueden descargarse del sitio: [www.liko.com](http://www.liko.com).

## Elevación con más de 90° de ángulo obtuso de cadera


Para pacientes que necesiten ser levantados con un ángulo obtuso de cadera, pero que no tengan las piernas amputadas, se recomienda el arnés Liko Amputados de talla mediana, en combinación con la percha cruzada 670. Como alternativa, se puede emplear la percha Universal 450 ó 670, en combinación con perchas de barras laterales.

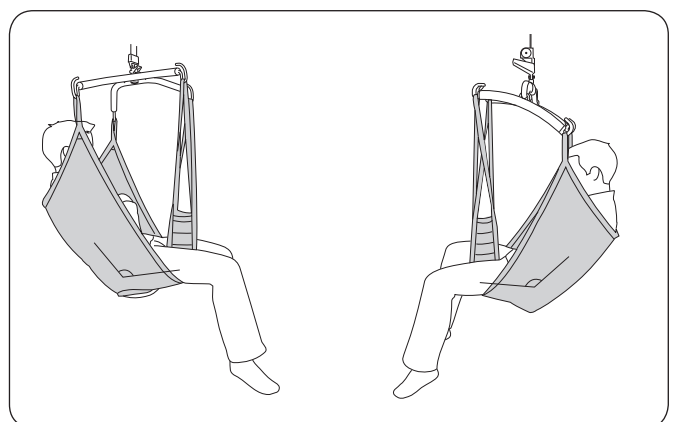


Arnés Liko Amputados,  
talla mediana con percha  
cruzada 450 ó 670.

Arnés Liko Amputados,  
talla mediana con perchas  
de barras laterales 450.

# Gama arnés Liko Amputados, mod. 70, 75

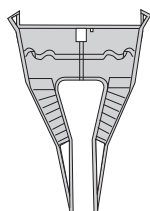

Artículo	Art. nº.	Talla	Peso paciente*
Arnés Liko Amputados, poliéster	3570114	S Pequeña	< 40 kg
Arnés Liko Amputados, poliéster	3570115	M Mediana	40-60 kg
Arnés Liko Amputados, poliéster	3570116	L Grande	> 60 kg
Arnés Liko Amputados, red de poliéster	3570315	M Mediana	40-60 kg
Arnés Liko Amputados RA**, poliéster	3575114	S Pequeña	< 40 kg
Arnés Liko Amputados RA, poliéster	3575115	M Mediana	40-60 kg
Arnés Liko Amputados RA, poliéster	3575116	L Grande	60-80 kg
Arnés Liko Amputados RA, poliéster	3575117	XL Extra grande	> 70 kg

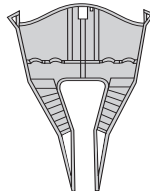

\* ¡Nota! Las indicaciones del peso del paciente sólo son orientativas. Hay desviaciones.  
\*\* RA = Respaldo alto.

**Una talla demasiado pequeña puede dar al paciente un apoyo demasiado malo y resulta más difícil de aplicar.  
Una talla demasiado grande implica el riesgo de salida por deslizamiento.**

Los arneses Liko han sido aprobados para una carga máxima de 200 kg o más, vea la etiqueta del producto.

## Consejos para el lavado:



No se recomienda el uso de secadora. Saque las varillas antes del lavado.

Antes de lavarlo, ¡consulte siempre los consejos para el lavado indicados en la etiqueta del arnés!

## Tiempo de vida útil estimado:

El producto tiene un tiempo de vida útil estimada de 1-5 años, o más, durante un uso normal. La vida útil depende de, por ejemplo, la tela, la frecuencia de uso, el método de lavado, y el peso cargado.

## Inspección periódica

Debe inspeccionar el producto al menos una vez cada 6 meses. Puede que sea necesario realizar inspecciones más frecuentes si los productos se usan o lavan más de lo normal. Consulte el protocolo de Inspección periódica de Liko para cada producto.

## Gama de pedido

Además del surtido estándar indicado más arriba en esta página, se pueden pedir arneses Liko Amputados de todas las tallas en otros materiales: algodón, red de poliéster y red plastificada, con o sin soportes rígidos de las piernas.

Con pedido especial, se puede obtener almohadillado de borreguito sintético en uno o los dos soportes de las piernas.

## Combinaciones recomendadas con arnés Liko Amputados y perchas Liko:

	Standard 450	Universal 450	Universal 600
Arnés Liko Amputados, S mod. 70 y 75	1	1	3
Arnés Liko Amputados, M mod. 70 y 75	1	1	1
Arnés Liko Amputados, L mod. 70 y 75	2	2	1
Arnés Liko Amputados, XL mod. 75	2	2	1

	Univ. 450 + perchas de barras laterales*	Univ. 670 + perchas de barras laterales*	Percha de cuatro puntos*	Percha cruzada 450*	Percha cruzada 670*
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3

### Código:

- 1 Recomendado
- 2 Posible
- 3 No recomendado
- 4 Inadecuado

\* Soportes de piernas del arnés colocados de forma cruzada delante del cuerpo, vea "Elevación con ángulo obtuso de cadera" en pág. 5.

**⚠ No destinado a la elevación de pacientes con piernas amputadas.**

CE Producto técnico-médico, clase I

Los productos Liko están en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho a introducir cambios en ellos sin previo aviso. Contacte con el representante local de Liko para obtener información, consejos y las eventuales actualizaciones.

## ⚠ ¡Importante!

La elevación y la transferencia de una persona implican siempre cierto riesgo. Estudie, por tanto, detenidamente la guía de instrucciones tanto de la grúa como de los accesorios. Es importante comprender plenamente el contenido de esas instrucciones. Sólo el personal informado de ellas debe utilizar el equipo.

Asegúrese de que el accesorio sea adecuado para la elevación que se vaya a hacer. Actúe con precaución y cuidado al utilizarlo.

En su calidad de cuidador, usted es siempre responsable de la seguridad del paciente. Tiene que estar informado de las posibilidades del paciente para superar la operación elevadora.

Controle el arnés con regularidad, en especial después de lavarlo. Ponga especial atención por lo que se refiere al desgaste y los posibles daños en costuras, tejido, cintas y lazos. No utilice accesorios dañados.

Si hay algo que no esté claro, contacte con el fabricante o el proveedor.



A Hill-Rom Company

www.liko.com

## Fabricante:

Liko AB  
SE-975 92 Luleå  
Suecia  
info@liko.se

