

Descrizione del prodotto

Gli occhielli di prolunga Liko sono pensati per un facile adattamento alla gamma di accessori Liko. Si attaccano alle asole delle cinghie e alle cinghie delle asole, per regolare la lunghezza in base alla necessità. Gli occhielli di prolunga sono disponibili in due lunghezze diverse e nei colori verde o grigio. La scelta della lunghezza dipende dalla misura occorrente per regolare l'imbracatura.

Nel presente documento verranno definiti "pazienti" le persone sollevate e "assistenti" le persone che le aiutano.


△ è un simbolo che richiama l'attenzione del lettore su situazioni che richiedono un livello maggiore di cura e attenzione.

i Leggere le Istruzioni per l'uso del sollevatore e di tutti gli accessori impiegati. Le istruzioni per l'uso si possono scaricare gratuitamente dal sito www.liko.com.

Avvertenze di sicurezza

Prima del sollevamento, tenere conto di quanto segue:

- Si noti che la geometria dell'imbracatura cambia quando si inseriscono gli occhielli di prolunga ai singoli occhielli delle cinghie. La modifica della geometria dell'imbracatura può compromettere la sicurezza, pertanto, osservare la massima prudenza durante la fase di prova, che deve essere condotta da un responsabile autorizzato.
- Controllare che gli occhielli di prolunga siano correttamente attaccati all'imbracatura / agli accessori prima di ogni sollevamento. Prestare particolare attenzione dopo il lavaggio.
- I bilancini Liko sono dotati di ganci di sicurezza, tuttavia, vi sono alcune fasi del sollevamento che richiedono particolare prudenza: prima di sollevare il paziente dalla superficie sottostante, ma dopo aver disteso completamente le cinghie, accertarsi che le cinghie siano adeguatamente agganciate al bilancino.

 Dispositivo medico di classe I

L'occhiello di prolunga Liko è stato testato da un istituto accreditato e soddisfa tutti i requisiti previsti dalla Direttiva sui dispositivi medici di classe I e dallo standard armonizzato EN ISO 10535.

Liko ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001 e la corrispondente certificazione specifica per il settore delle attrezzature medico-sanitarie, la ISO 13485. A Liko è stata inoltre concessa la certificazione ambientale ISO 14001.

I prodotti Liko vengono continuamente perfezionati, per cui ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza obbligo di preavviso. Per qualsiasi informazione e raccomandazione sulle versioni aggiornate dei prodotti, contattare il distributore Liko.

IMPORTANTE!


Il sollevamento e il trasferimento di un paziente comportano sempre un certo rischio. Prima dell'uso, leggere le istruzioni del sollevatore e degli accessori di sollevamento. È importante comprendere integralmente i contenuti delle istruzioni. Il dispositivo può essere usato solo da personale addestrato. Assicurarsi che gli accessori siano adatti all'uso con il sollevatore impiegato. Durante l'uso, procedere con la massima cura e prudenza. L'assistente è sempre responsabile per la sicurezza del paziente. L'assistente dovrà essere in grado di valutare la capacità del paziente di affrontare il sollevamento.

Cura e manutenzione


Ispezionare regolarmente gli accessori di sollevamento, soprattutto dopo il lavaggio. Prestare particolare attenzione a segni di usura, strappi e ad eventuali danneggiamenti a cuciture e alle cinghie. Non utilizzare accessori di sollevamento danneggiati. In caso di dubbi, contattare il produttore o il fornitore.

Istruzioni di lavaggio: consultare l'etichetta degli accessori di sollevamento.

Assemblaggio

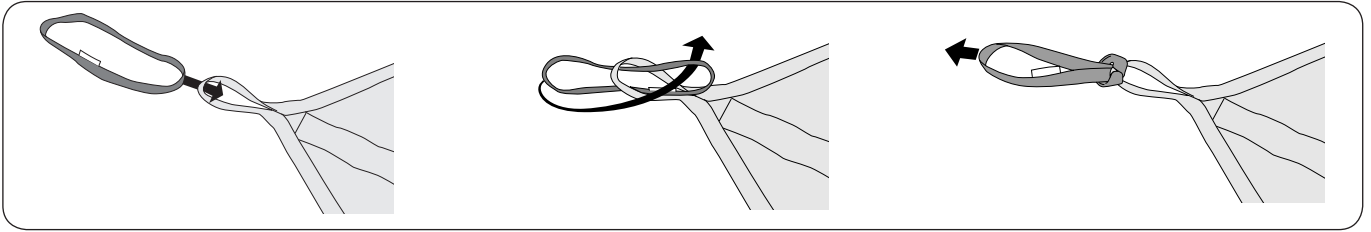


Campi d'impiego

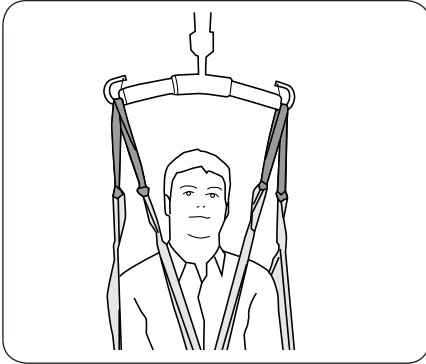


1. Aumento della distanza tra la testa e il bilancino

Estendere **tutti** gli occhielli delle cinghie dell'imbracatura/degli accessori di sollevamento per aumentare la distanza della testa del paziente dal bilancino. Attenzione, più sono lunghi gli occhielli di prolunga impiegati, maggiore sarà l'altezza dell'imbracatura, il che potrebbe complicare il sollevamento al livello desiderato.

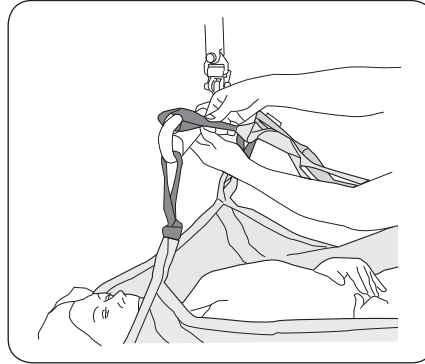


2. Semplificazione del collegamento al bilancino

Se gli occhielli delle cinghie dell'imbracatura/dell'accessorio di sollevamento non raggiungono il bilancino, estendere **tutti** gli occhielli della cinghia dell'imbracatura per semplificare il collegamento. Un'estensione eccessiva può rendere difficile sollevare il paziente al livello desiderato.

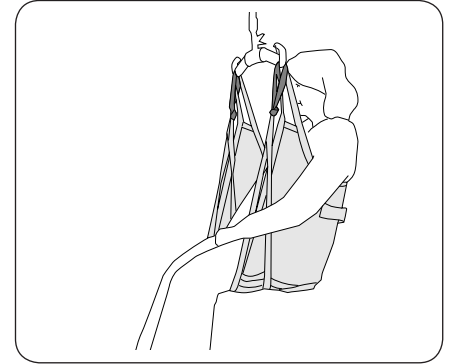


3. Posizione seduta più eretta

Quando si posizionano i supporti gambe, di un'imbracatura, incrociati sotto entrambe le gambe, potrebbe essere necessario estendere gli occhielli del supporto gambe per raggiungere una posizione seduta più eretta.

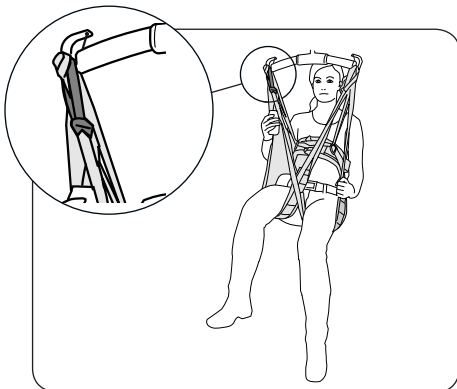


4. Minore piegamento dell'anca

Estendere l'occhiello del supporto gambe per ottenere un angolo di apertura dell'anca più ampio. Questa operazione può essere eseguita su un solo occhiello o su entrambi gli occhielli, a seconda della necessità.

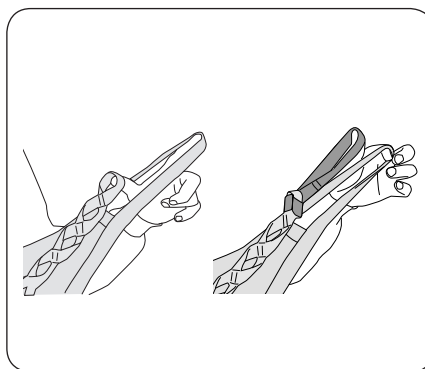

5. Regolazione della lunghezza della cinghia dell'occhiello


Estendere le cinghie dell'imbracatura/le cinghie dell'occhiello dell'accessorio di sollevamento se sono troppo corti. L'occhiello di prolunga può essere collegato ad uno degli occhielli esterni sulla cinghia dell'occhiello, in base alle necessità.

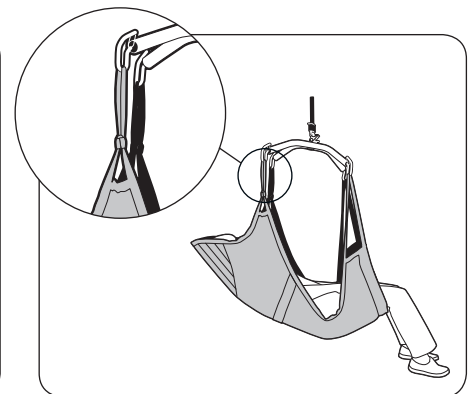

6. In combinazione con imbracatura Comfort Plus/Comfort

Quando si utilizzano le imbracature Comfort Plus mod. 300/310/350/360 o Comfort mod. 30/31/35/36 in combinazione con barre trasversali Liko o barre laterali, occorre **sempre** estendere gli occhielli superiori delle cinghie. Questa combinazione consente di ottenere una posizione seduta più reclinata, riducendo il piegamento dell'articolazione dell'anca. Vedere le istruzioni per l'uso delle imbracature.

Occhiello di prolunga Liko

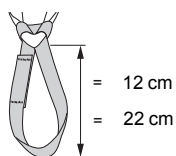

Denominazione	Art. N°	Estensione	Portata massimo
Occhiello di prolunga, verde, 12 cm	3691102	12 cm	150 kg/pz.
Occhiello di prolunga, verde, 22 cm	3691103	22 cm	150 kg/pz.
Occhiello di prolunga, grigio, 12 cm	3691302	12 cm	150 kg/pz.
Occhiello di prolunga, grigio, 22 cm	3691303	22 cm	150 kg/pz.

Combinazioni approvate

Gli occhielli di prolunga Liko devono essere usati esclusivamente con gli accessori di sollevamento della gamma Liko. Sono consentite combinazioni con i seguenti accessori di sollevamento in base ai campi d'impiego (1 - 6) descritti a pagina 3.

	Campo d'impiego 1*	Campo d'impiego 2*	Campo d'impiego 3	Campo d'impiego 4	Campo d'impiego 5	Campo d'impiego 6
Imbracatura Universale, mod. 00/02	2	2	2	2	4	4
Imbracatura Ultra, mod. 06 – vedere le Istruzioni per l'uso del prodotto	-	-	-	-	-	-
Imbracatura Originale, mod. 10/11	2	2	2	2	4	4
Imbracatura Originale con schienale alto, mod. 20/21	2	2	2	2	4	4
Imbracatura Silhouette, mod. 22	2	2	2	2	4	4
Imbracatura Monopaziente con schienale alto, mod. 25	2	2	2	2	4	4
Imbracatura Originale Soft con sostegno alto per la schiena, mod. 26	2	2	2	2	4	4
Imbracatura Comfort, mod. 30/31/35/36	2	2	4	4	4	1
Imbracatura Comfort Plus, mod. 300/310/350/360	2	2	4	4	4	1
Imbracatura da toilette, mod. 40/41/45/46	2	4	3	3	2	4
Imbracatura da toilette, mod. 50/55	2	4	2	2	2	4
Imbracatura MasterVest, mod. 60/64	2	4	4	4	2	4
Imbracatura con schienale rigido, mod. 67	2	2	4	4	2	4
Imbracatura per amputati, mod. 70/75	2	2	3	3**	4	4
Imbracatura per deambulazione, mod. 92	2	4	4	4	2	4
Imbracatura per deambulazione Ultra, mod. 920	2	4	4	4	2	4
Cinghie Liko, N° art. 3590115	3	3	4	4	4	4
Sostegno per la nuca	2	2	4	4	4	4
Lenzuolo di posizionamento originale	4	4	4	4	4	4
Sabina - accessori						
Imbracatura SupportVest, mod. 91	4	2	4	4	4	4
Imbracatura SupportVest Monopaziente, mod. 911	4	2	4	4	4	4
Giubbotto di sicurezza, mod. 93/94	4	2	4	4	2	4
Imbracatura toracica Comfort, mod. 95	4	2	4	4	2	4
Fascia	4	2	4	4	2	4
Barelle – accessori						
Lenzuolo di sollevamento Octo, mod. 83	4	2	4	4	4	4
Lenzuola di sollevamento Monopaziente Octo, mod. 83	4	2	4	4	4	4
Fascia di sollevamento Octo, mod. 83	4	2	4	4	4	4
Fascia incrociata Octo, mod. 83	4	2	4	4	4	4
Lenzuola di sollevamento XL, mod. 84	4	2	4	4	4	4
Fascia di sollevamento XL, mod. 84	4	2	4	4	4	4

Legenda: 1 = Deve essere usato 2 = Può essere usato 3 = Può essere usato, tuttavia occorre tenere presente che comporta una modifica alla geometria dell'imbracatura 4 = Non rilevante/Non raccomandato

* Estendere tutti gli occhielli delle cinghie del prodotto.

** Con supporti gambe incrociati.



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Produttore:

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

Distributore per l'Italia:

Sago Medica s.r.l.
Via Zallone, 25
40066 Pieve di Cento, Bologna
Tel: +39 051 686 08 11
Fax: +39 051 686 12 46
info@sagomedica.it

Distributore per la Svizzera:

Liko Care AG
Bannstraße 1
4124 Schönenbuch
Tel: +41 (0) 61-4822222
Fax: +41 (0) 61-4821923
info@liko.ch

